

Тест за бременност

с ПРОМЕНЯЩ ЦВЕТА СИ ВРЪХ

- Clearblue® PLUS е с над 99% точност от деня на очакваната менструация.
 - Clearblue® PLUS може да се използва 5 дни преди закъснението на менструацията.
- Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите тест.

Преди да започнете

Може да е полезно до вас да има часовник, когато правите теста.

1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТА

Ако се тествате от деня на очакваната менструация, можете да го направите по всяко време на деня.

Ако се тествате преди деня на очакваната менструация, използвайте първата си сутрешна урина.

Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от флиевата опаковка и отстранете синята капачка. Използвайте тестовия стик веднага.

ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА УРИНА

Можете да тествате директно под струя урина или да потопите в проба урина, събрана в чист и сух съд.

- Дръжте променящия цвят си връх надолу или под

Вижте въпрос 7, ако променящия цвят си връх не е порозовял напълно.



струя урина, или в събрана проба урина, както е показано, само за 5 секунди.

- Променящия цвят си връх бързо ще се оцвети в розово, което означава, че се абсорбира урина. Продължете да задържате променящия цвят си връх в урината за не по-малко от 5 секунди.



Продължете да задържате променящия цвят си връх в урината за не по-малко от 5 секунди.

Започнете да отбелявате 5 секунди веднага щом видите, че променящия цвят си връх стане розов.

Струя урина ИЛИ Взети проби

- Дръжте променящия цвят си връх ориентиран надолу или поставете стика върху равна повърхност, докато настъпи моментът да прочетете резултата и се появи синя линия на контролния дисплей.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ.

2 3 МИНУТИ

ИЗЧАКАЙТЕ 3 МИНУТИ.

Когато тестът започне да работи, ще видите как започва(т) да се появява(т) синя(и) линия(и).

3 ОТЧИТАНЕ НА ВАШИЯ РЕЗУЛТАТ


Вече можете да прочетете резултата си на дисплея с резултат.

На контролния дисплей трябва да има синя линия, когато отчитате резултата си. Тази линия показва, че тестът е проработил.

Резултат „Бременна сте“ може да се появи след 1 минута, когато се тествате от деня на закъснение на менструацията (който е денят след деня на очаквана менструация, която не е дошла). Трябва да изчакате 3 цели минути, за да се потвърди резултат „Не сте бременна“ или когато се тествате, преди да има закъснение на менструацията ви (вижте въпрос 10).

Ако на контролния дисплей не се появи синя линия в рамките на 10 минути, това означава, че тестът не работи (вижте въпрос 7).

Дисплей с резултат Контролен дисплей

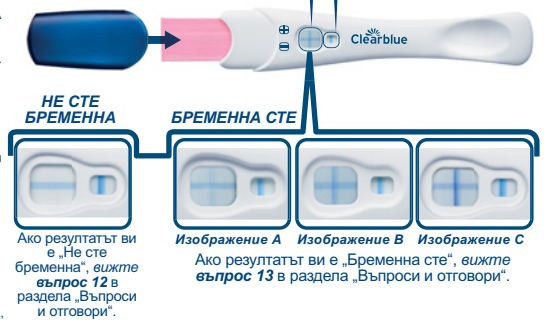

НЕ СТЕ БРЕМЕННА
Ако резултатът ви е „Не сте бременна“, вижте въпрос 12 в раздела „Въпроси и отговори“.

БРЕМЕННА СТЕ
Изображение А
Изображение В
Изображение С
Ако резултатът ви е „Бременна сте“, вижте въпрос 13 в раздела „Въпроси и отговори“.

Няма значение дали едната от линиите, образувачи символа „+“, е по-светла или по-тъмна от другата – резултатът е „Бременна сте“.

ВАЖНО!

Отчетете резултата в рамките на 10 минути след извършването на теста. Не вземайте под внимание промените в резултата след този период.

Ако все още не сте сигурна в резултата, вижте въпрос 8 за пълна информация.

Въпроси и отговори – Прочетете раздела по-долу, в който ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Въпроси и отговори

1 Колко точен е тестът Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS е с над 99% точност при лабораторни тестове, когато се използва от деня на очакваната менструация.

2 Как работи тестът Clearblue® PLUS?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хормон гонадотропин). Количеството на hCG в тялото се повишава по време на ранна бременност. Clearblue® PLUS може да разпознае малки количества от този хормон в урината ви (чувствителността на този тест е 25 mIU/ml).

Ранно тестване	
Брой дни преди очакваната менструация	% проби от бременни жени с резултат „Бременна сте“
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

3 Кога мога да се тествам с Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS може да се използва до 5 дни преди закъснението на менструацията (което е 4 дни преди очакваната менструация). Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. Вижте таблицата по-долу за резултати от клинични изпитвания на Clearblue® PLUS с проби на ранна бременност.

4 Трябва ли да използвам първа сутрешна урина?

Ако се тествате от очакваната менструация, препоръчваме ви да тествате първата си сутрешна урина за деня. В противен случай можете да се тествате по всяко време на деня. Избягвайте приемането на големи количества течности преди тестването.

5 Не съм сигурна кога да очаквам следващата си менструация. Как да разбера, че се тествам в точното време?

- За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като преброите дните от първия ден на менструацията до деня преди началото на следващата менструация.
- Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.
- Ако имате представа кога да очаквате менструацията си, препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след последния път, когато сте имали сексуален контакт без предпазни средства.
- Ако резултатът е „Не сте бременна“, но все още подозирате бременност, вижте въпрос 13.

6 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?

- Винаги четете инструкциите на производителите на всички лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
- Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, могат да дадат подвеждащи резултати (такива лекарства за забременяване обикновено се поставят с инжекция и тестването трябва да се направи след прием на инжекция след резултат „Бременна сте“).
- Друг тип терапии за забременяване (например кломифен цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви (напр. контрацептивни таблетки) не ви трябваво да повлияят на резултата.
- Ако наскоро сте спрели да приемате хормонални контрацептиви или се подлагате на терапии за забременяване, като кломифен цитрат, цикълът ви може да е нередовен, което да доведе до тестване твърде скоро.
- Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сте“.

- Ектопична бременност, овариални кисти, менопауза и някои много редки медицински състояния могат да доведат до неверни резултати.
- Ако получите резултат „Бременна сте“, е възможно по-късно да откриете, че вече не сте бременна поради естествено прекратяване на бременността, което може да се случи в ранните стадии.
- Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с вашия лекар.

7 Използвах теста, но променящия цвят си връх не порозовя напълно. Какво да правя?

Ако променящия цвят си връх не е порозовял напълно, може да не сте използвали достатъчно урина. Ако синята линия на контролния дисплей се появи в рамките на 10 минути след извършването на теста, това означава, че тестът работи. Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 10 минути след извършването на теста, вижте въпрос 8.

8 Използвах теста, но не се появи синя линия на контролния дисплей. Какво да правя?

Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 10 минути след извършването на теста, това означава, че тестът не работи. Възможни причини:

- Променящия цвят си връх не е бил насочен надолу или тестовия стик не е бил поставен върху равна повърхност, след като е бил в контакт с урината.
- Използвано е твърде голямо или твърде малко количество урина. Необходимо е да подложите на проба урина за 5 секунди.

9 Какво да правя, ако не съм сигурна в резултата?

• За да бъде резултат ви „Бременна сте“, трябва да се появи синя линия на контролния дисплей и символ „+“ на дисплея с резултат в рамките на 10 минути след извършването на теста.

Външният вид на символа „+“ на дисплея с резултат може да се различава, но линиите, които образуват символа „+“, и линията на контролния дисплей трябва да имат еднаква ширина (вижте изображение А–С).

Изображение А
Това обозначава резултат „Бременна сте“. Това е по-вероятно, когато се тествате преди деня на очакваната менструация, когато нивата на hCG може да са относително ниски.

Изображение В
Не е необичайно, когато сте бременна и се тествате в или около деня на очакваната менструация, тъй като нивата на hCG може все още да са относително ниски.

Изображение С

IVD	Медицинско изделие за инвитро диагностика	LOT	Партиден номер	Не използвайте повторно
TEMP	Температурно ограничение 2°C–30°C	DA	Да се използва до дата:	Производител
CE		CE		Направете справка с инструкциите за употреба

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария.
Clearblue е търговска марка на SPD. Произведено в Китай
© 2015 SPD. Всички права запазени

Дистрибутор: OVLASTENI ZASTUPNIK ZA RH - Orbio d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия.

По-вероятно не да се появи, когато сте бременна и се тествате няколко дни след очакваната менструация, тъй като нивата на hCG са по-високи.

- Ако все още не сте сигурна в резултата, необходимо е да изчакате поне 3 дни, преди да се тествате отново, и да се уверите, че следвате инструкциите точно.
- За да бъде резултатът ви „Не сте бременна“, трябва да се появи синя линия на контролния дисплей и символ „-“ (минус) на дисплея с резултат в рамките на 10 минути след извършването на теста. Ако вашият резултат е „Не сте бременна“, но все още все още подозирате бременност, вижте въпрос 13.

10 Какво може да повлияе на точността на резултата?

Ако се тествате по-рано от деня на очакваната менструация, точността на Clearblue® PLUS ще е по-ниска. Ако не тествате урината си за точно определено време, може да не получите надежден резултат. Когато обаче видите синя линия на контролния дисплей в рамките на 10 минути от извършване на теста, можете да разчитате на резултата. Ако многократно получавате неочаквани резултати, трябва да се консултирате с лекаря си. Също така вижте въпрос 6.

11 Кога мога да отчета резултата?

Резултат „Бременна сте“ може да се появи дори след 1 минута, когато се тествате от деня на закъснение на менструацията ви (който е денят след деня на очаквана менструация, която не е дошла). Уверете се, че на контролния дисплей има синя линия, преди да отчетете резултата си. Трябва да изчакате 3 минути, за да се потвърди резултат „Не сте бременна“ или когато се тествате преди очакваната менструация. Ако на контролния дисплей не се появи синя линия в рамките на 10 минути, това означава, че тестът не е проработил (вижте въпрос 8).

12 Колко време трябва да мине, за да отчета резултата?

Резултатът може да се отчете по всяко време в интервала между 3 и 10 минути. След изтичане на 10 минути всяка промяна в резултата не трябва да се взема под внимание.

13 Тестът показва, че не съм бременна. Какво да правя?

Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността все още да не е достатъчно високо, за да може да бъде разпознато, или може да сте изчислили погрешно деня на очакваната менструация.

- Ако сте тествали рано, тествайте се отново, когато се очаква менструацията ви.
- Ако менструацията ви закъснява, тествайте се отново след 3 дни. Ако отново получите резултат „Не сте бременна“ и все още нямате менструация, консултирайте се със своя лекар.

14 Тестът показва, че съм бременна. Какво да правя?

Ако тестът показва, че сте бременна, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемете след това.

За следващи стъпки, информация и съвети, свързани с въпроси на бременността посетете нашия уебсайт:

www.clearblue.com

Това изделие е за домашна употреба. Да се съхранява на стайна температура.

Оставете при стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се съхранява в хладилник.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Само за инвитро диагностика.

Да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Да не се използва, ако флиевата опаковка е повредена. Да не се използва тестов стик с изтекъл срок на годност.

